



PORADNIK PRZESYŁANIA DANYCH

Nowe oprogramowanie CareLink™ Personal

Łatwe w użyciu


Wygodne przesyłanie danych

Przejrzyste analizy przyczynowo-skutkowe

PRZYGOTUJ WSZYSTKIE NIEZBĘDNE ELEMENTY

Podłącz CareLink™ USB
lub glukometr do komputera

- Upewnij się, że pompa znajduje się blisko podłączonego do komputera urządzenia CareLink™ USB lub glukometru.
- Jeśli używasz glukometru, musi on być sparowany z pompą.

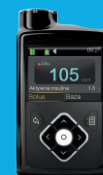

**Sprawdź, czy pompa jest
gotowa do przesyłania danych**
Upewnij się, że na pompie nie
wyświetla się któryś z poniższych
ekranów:




Pompa jest gotowa do przesyłania
danych, gdy:


- ☒ Brak dawki tymczasowej
- ☒ Brak alarmów
- ☒ Brak aktywnych bolusów
- ☒ Brak niskiego poziomu baterii

Medtronic

PRZESYŁANIE DANYCH Z POMPY INSULINOWEJ LUB GLUKOMETRU

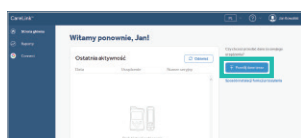


1 Kliknij „Prześlij dane teraz” i poczekaj, aż otworzy się ekran uploadera.

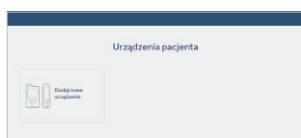

2 Kliknij „Dodaj nowe urządzenie”, jeśli pierwszy raz przesyłasz dane.




3 Następnie kliknij „Wybierz typ urządzenia”.

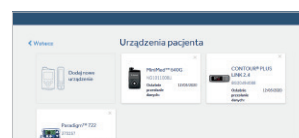

3a Jeśli już przesyłałeś dane z urządzenia, to na ekranie „Urządzenia pacjenta” wybierz to, z którego chcesz przesyłać dane.


Prześlij dane z glukometru

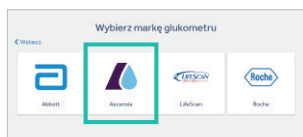

A. Wybierz producenta, jeśli chcesz przesyłać wyłącznie dane z glukometru.




B. Wybierz model glukometru.

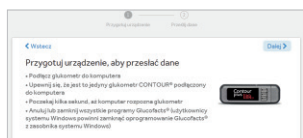

C. Kliknij „Dalej”, aby przygotować urządzenie do przesyłania danych.




D. Poczekaj na zakończenie przesyłania.

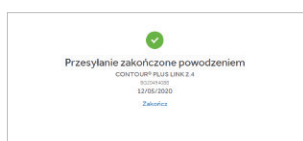


E. Przesyłanie powiodło się.


Prześlij dane z pompy

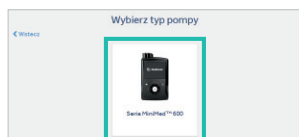


A. Wybierz model pompy.

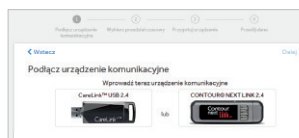


B. Podłącz urządzenie komunikacyjne.

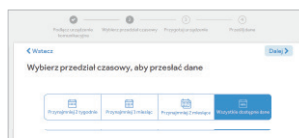


C. Wybierz przedział czasowy, aby przesyłać dane.

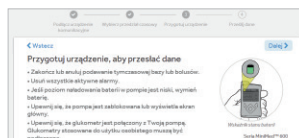


D. Postępuj zgodnie z instrukcją, aby przygotować urządzenie do przesyłania danych.

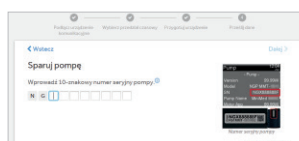

E. Wprowadź numer swojej pompy (tylko pierwsze przesyłanie danych).

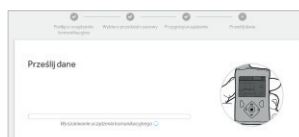

F. Poczekaj na zakończenie przesyłania.

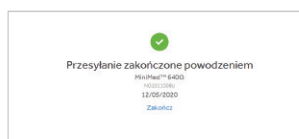

G. Przesyłanie powiodło się.